
Joint Replacements

Trauma

Spine

Micro Implants

Orthobiologics

Instruments

Interventional Pain

Navigation

Endoscopy

Communications

Patient Handling Equipment

EMS Equipment

Stryker Iberia, S.L.

Oficina Central:
Manuel Tovar, 35
28034 Madrid - España
Tel.: +34 917 283 500 Fax: +34 913 580 748

Delegación Barcelona:
Aragó, 208-210
08011 Barcelona - España
Tel.: +34 934 527 440 Fax: +34 934 527 442

www.stryker.es

La información de este folleto presenta un producto STRYKER. Antes de utilizar cualquier producto STRYKER debe leer la información de acompañamiento del embalaje, las instrucciones de uso y el etiquetado del producto. Si no se siguen, STRYKER no se hace responsable de las consecuencias que pudieran derivarse. La disponibilidad de los productos en los diferentes mercados depende de las regulaciones y prácticas médicas existentes. Póngase en contacto con STRYKER Iberia, S.L. para cualquier pregunta referente a la disponibilidad de productos en su área.

STRYKER se reserva el derecho a introducir modificaciones técnicas. Este folleto debe ser exclusivamente para la oferta y compraventa de nuestros productos. Está prohibida la reimpresión completa o parcial. En caso de uso indebido nos reservamos el derecho a tomar las medidas legales oportunas.

Los productos marcados [™] son marca STRYKER.
Los productos marcados [®] son marca registrada STRYKER.

FLOSTEADY

La Solución FÁCIL y PRECISA
en control de PRESIÓN y FLUJO

- Bomba de Artroscopia Flosteady
- Utilización con Batería
- Pantalla táctil LCD



Máxima Precisión en el Mínimo Espacio



Bomba de Artroscopia Flosteady

Características y Beneficios

- **Máxima Seguridad:**
Precisión: Mide la presión real en la articulación.
Control continuo del flujo de entrada (hasta 3 l/min).
- **Mejor visibilidad.**
- **Simplicidad de uso:**
Pantalla táctil, pedal o mando autoclavable.
Fácil y rápida colocación de tubos: Cassette desechable.
- **Diseño ergonómico y Comodidad en quirófano:**
Posibilidad de uso con baterías: Hasta 6 horas de duración.
Menor tamaño: Más espacio en quirófano.



Innovador Sistema de Tubos Desechable: Fácil de Cargar

- Tubos en cajetín desechable:
Ergonómico y sencillo de poner y quitar.



FÁCIL colocación de los tubos:



1. Debe utilizarse un cassette de tubos en cada uso. Encender la bomba antes de poner los tubos.



2. Coja el cassette de tubos con el dedo pulgar en el borde superior y el resto en el borde inferior. Sujete la bomba con la otra mano mientras introduce el cassette.



3. Presionar el cassette hasta oír un "click". Compruebe que está a ras de la bomba. La bomba ya está lista para ponerse en marcha.

Precisión y Control


con sólo Tocar un Botón



Pantalla táctil LCA táctil:

Características y Beneficios

- **Continúa visualización de la presión** a través de un sencillo gráfico de barras.
- **Mejor Visualización** de los mensajes de seguridad y control.
- **Función Turbo:** Incrementa flujo y presión para mantener la distensión en determinados procedimientos.
- **Función Wash:** Permite limpiar la articulación de forma rápida y eficaz.

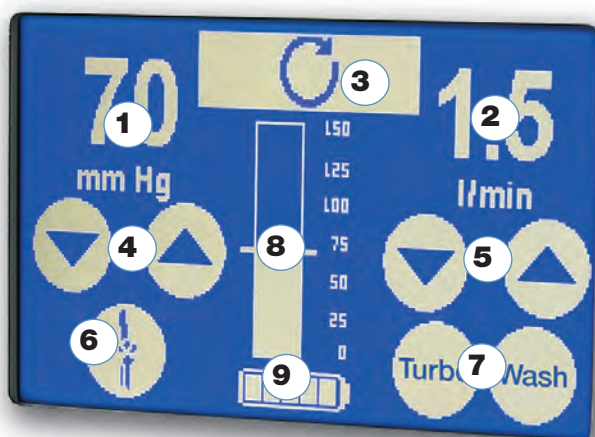

1. Presión deseada
2. Máximo Flujo entrada
3. Indicador entrada Flujo
4. Incremento/descenso presión
5. Incremento/descenso flujo
6. Preprogramas articulaciones
7. Funciones Turbo y Wash
8. Presión real intra-articular
9. Nivel carga batería

Eficacia

y Ahorro de Espacio



- **Flosteady** puede ser utilizada con mando autoclavable o pedal. Desde ambos puede poner en funcionamiento la bomba o apagarla, subir o bajar los niveles de presión y flujo, así como manejar las funciones de Wash y Turbo.



- Fácil ubicación en el palo de gotero.
- Ahorra espacio en quirófano y permite moverla fácilmente

Bomba Artroscofia Flosteady: **Ref. 0350-800-503**

Cassette tubos desechable: **Ref. Z1450-39**

Pedal: **Ref. Z0107-39**

Mando autoclavable: **Ref. 0350220000**